

 **S-line**

 **Barkey**
Quality made in Germany

Blod og væske
varmer



The Barkey *S-line* smart – enkel – sikker

Avanceret teknologi: Ettrykskontrol

- Barkey s-line opvarmer blodprodukter og infusioner til patienten.
- Den elektrisk opvarmede silikone-slange med ensidet åbning kan tage standard IV-sæt.
- Barkey s-line er nem at betjene på alle hospitalets afdelinger.
- Den er ekstremt nem at rengøre på grund af den glatte overflade.
- S-line har store, fleksible anvendelsesområder ved brug for low og medium flow krav. Et optimalt alternativ til apparatur der kræver brug af engangstilbehør.


Undgå hypotermi

Varme er nøglen til patienternes velbefindende! Med Barkeys prisrimelige s-line-udstyr kan du tilføre varme, der forbedrer behandlingen for alle patienter og optimerer ophelingsprocessen. Resultat: Mindre arbejde for plejepersonalet og reducerede behandlingsomkostninger.

Specialfremstillet teknologi til hospitaler

Oversigt over yderligere fordele

- Integreerede temperaturfølere
- Garanteret bedste opvarmning og højeste sikkerhed.
- Komplet omslutning af IV-sæt og derfor optimal opvarmning
- Ingen ekstra forbrugerartikler
- Velegnet til brug for blod/væske opvarmning ved dialyseterapi
- Opvarmning af enteral og/eller parenteral ernæring
- Betjeningsikkerhed takket være forudindstillet temperatur
- Visning af varmемanchettens faktiske temperatur
- Fås i en række forskellige diametre
- Glat overflade, derfor nem at vaske og desinficere
- Udelukkende brug af biologisk bio-compatible materialer
- Optisk og akustisk signal i fejlsituationer

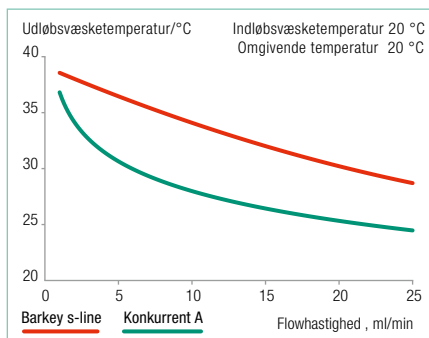

Eksklusive innovative teknologiske løsninger med de højeste kvalitetsstandarder og specialiserede fordele for praksis – dette er grundlaget for det holistiske Barkey-opvarmningskonceptets succes. Barkey har opnået sit enestående ry ved hjælp af enestående teknisk know-how inden for medicinsk teknologi gennem de seneste 30 år.

Den høje kvalitet og det pålidelige og praktiske udstyr, der generelt forbindes med "made in Germany" har etableret sig indenfor en lang række anvendelsesområder.

Virkelige innovationer og problemløsninger, der giver brugeren særlige fordele, kan kun udvikles af personer, der holder øjne og ører åbne, taler med specialister i praksis og tager højde for deres behov i tide.

Derfor vil vi opfordre dig til en opretholde en aktiv dialog med os: Har du nogen spørgsmål vedrørende anordninger og systemer i Barkeys varmekoncept?

Hvilke specialistspørgsmål kan vi besvare for dig?

Hvilke forslag har du til os?

Tlf.: +45 22 18 11 68
e-mail: info@hbimedical.dk

Type	Barkey s-line
Artikelnummer	213.10285
Temperaturindstilling	39 °C fra fabrikken
Varmeprofils længde	L: 1 500 mm
Tilgængelige indvendige diametre	4.30 mm 6.55 mm
Egent til infusions-slangediametre på	4.0 to 7.0 mm
Vægt	ca 1 300 g
Strømforsyning	100-240V, 50/60Hz
Strømforbrug	75 Watt
Tilslutningsledning	3 m
Sikringsklasse	I, jordet Type BF Til ind- og udvortes brug Med isolerte pasientfunksjonsdeler
Beskyttelse mod fugt	IP X2
Certificering	CE 0123
Barkey is certificeret iht.	ISO 9001 ISO 13485
Made in Germany	



Tilbehøret vist på billedet er ikke inkluderet i leverancen